

COVID-19 Schnelltest

Für eine sofortige Gewissheit



Produktname	GenBody COVID-19 Ag
Herstellungsort	GenBody Inc., GenBody Building, 3-18, Eopseong 2-gil, Seobuk-gu, Cheonan-si, Chungnam, 31077, Korea
Produktcode	PRGxx2000y / COVAG025
CE-Kennzeichen	Ja
Dokumentnr. der Registrierung in DE	00092221 durch Medical Technology Promedt Consulting GmbH
Anwendungsgebiet	Immuno-chromatographischer Schnelltest zum qualitativen Nachweis von SARS-CoV-2-Antigen im Nasopharyngealabstrich
Test Type	Qualitative
Instrument	Gerätefrei
Probenmaterial	Nasopharyngeal
Ziel Antigen	Nucleocapsid (N)
Auslesezeit	15-20 Minuten
Lagertemperatur	2-30°C
Anwender	Medizinisches Fachpersonal

FUNKTION

Gewissheit auf einen Blick

Steigende Infektionszahlen und ein langer risikoreicher Weg zu einem Testzentrum sorgen für eine rasant steigende Nachfrage nach einem schnellen und einfachem Test.


Der Schnelltest zum qualitativen Nachweis von SARS-CoV-2-Antigen ist nicht nur ein EU-zertifiziertes Produkt sondern ist auch einfach in der Benutzung.

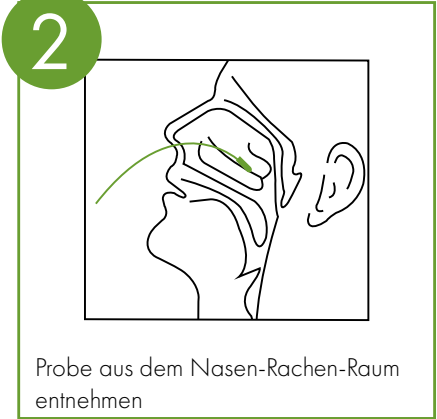
VORTEILE

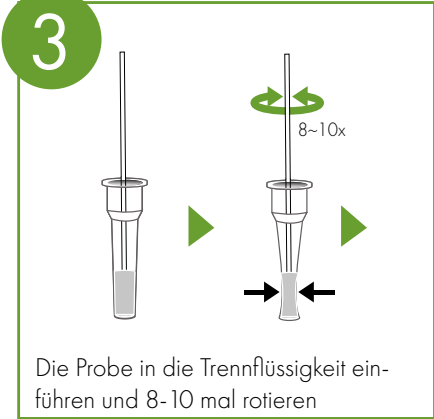
- ✓ Schnelles Ergebnis (15 – 20 Minuten) – kein Folgetermin zur Besprechung der Testergebnisse erforderlich
- ✓ Einfache Handhabung, keine zusätzlichen Materialien notwendig
- ✓ Testmöglichkeit dort, wo keine Labortests zur Verfügung stehen
- ✓ Test für den professionellen Gebrauch vorgesehen

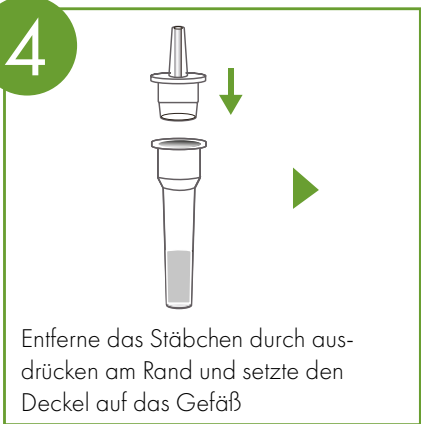
Testanwendung


Einfache und schnelle Anwendung

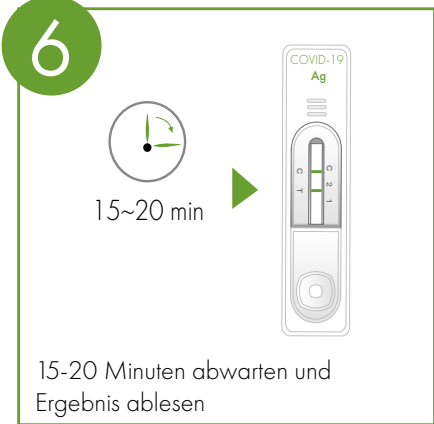
- 

Trennflüssigkeit bis zur Fülllinie befüllen
- 

Probe aus dem Nasen-Rachen-Raum entnehmen
- 

Die Probe in die Trennflüssigkeit einführen und 8-10 mal rotieren
- 

Entferne das Stäbchen durch ausdrücken am Rand und setze den Deckel auf das Gefäß
- 

Vier Tropfen der Probe auf die vorgesehene Probenaufnahmen füllen
- 

15-20 Minuten abwarten und Ergebnis ablesen

Funktion

Interpretation der Ergebnisse

